

MoodSupport – Installationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation, Nutzungshinweise und Deinstallation der MoodSupport-App unter Windows. Es stehen zwei Installationsvarianten zur Verfügung: MSI-Installer (empfohlen, benötigt Administratorrechte) und ZIP-Version (keine Administratorrechte erforderlich).


Hinweis zu Sicherheitswarnungen

Beim ersten Start des MSI-Installers oder der Datei MoodSupport.exe aus der ZIP-Version kann Windows oder eine installierte Sicherheitssoftware eine Warnmeldung anzeigen. Das liegt daran, dass MoodSupport im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie verteilt wird und aktuell nicht mit einem kommerziellen Code-Signing-Zertifikat signiert ist. Das Erscheinungsbild dieser Warnung kann je nach Windows-Version oder verwendetem Virenschutzprogramm unterschiedlich aussehen. In diesem Fall sind den Anweisungen der jeweiligen Software zu folgen, um MoodSupport als vertrauenswürdige Anwendung zuzulassen.

Beim typischen Beispiel der Windows-SmartScreen-Warnung ist wie folgt vorzugehen:


Schritt 1

Innerhalb der Meldung auf "Weitere Informationen" klicken.

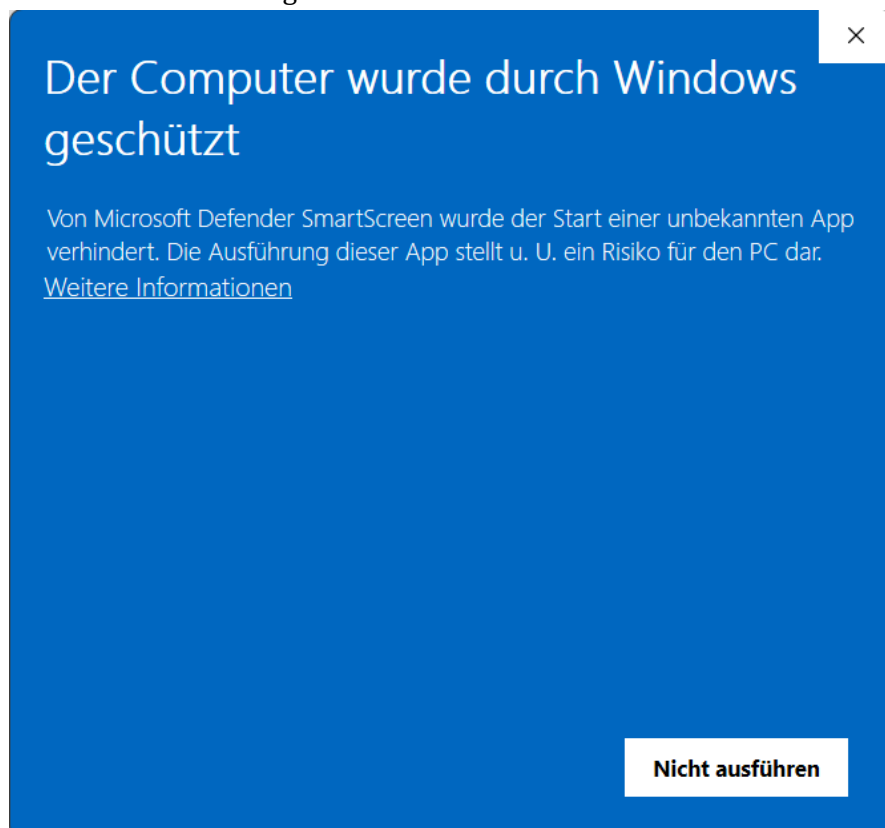

Schritt 2

Anschließend auf "Trotzdem ausführen" klicken, um die Installation bzw. den Start von MoodSupport fortzusetzen.

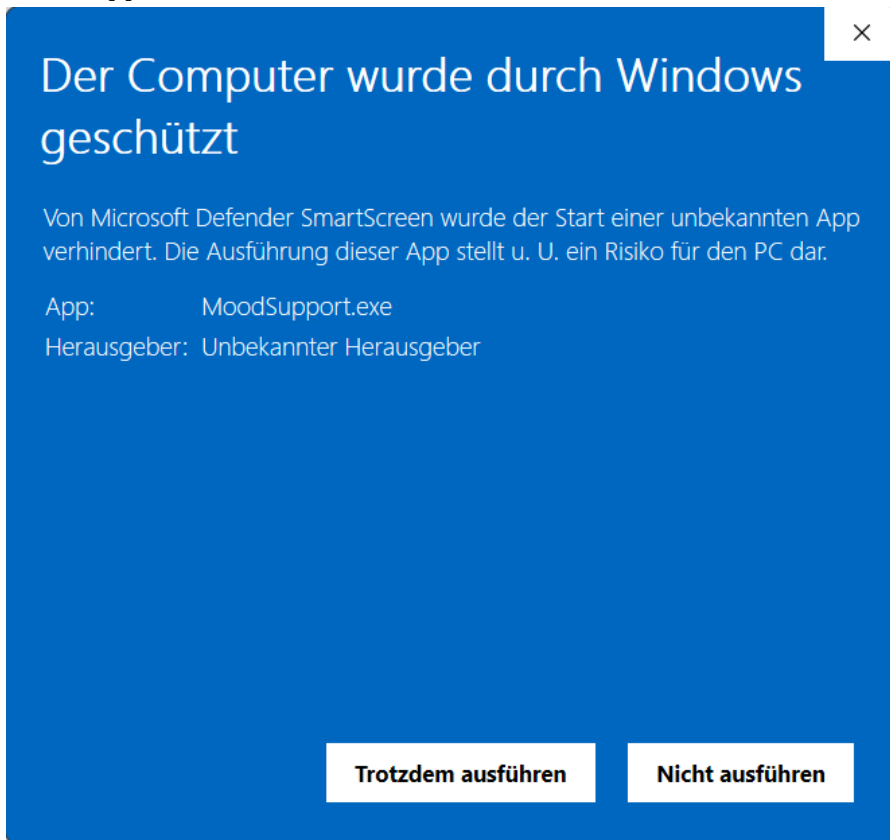

Option 1: Installation über den MSI-Installer


Schritt 1

Die Datei "MoodSupport-1.0.0.msi" herunterladen und per Doppelklick öffnen.




Schritt 2

Im Setup-Assistenten auf "Weiter" klicken. Den Zielordner bei Bedarf anpassen oder die Standardeinstellung beibehalten und erneut auf "Weiter" klicken.

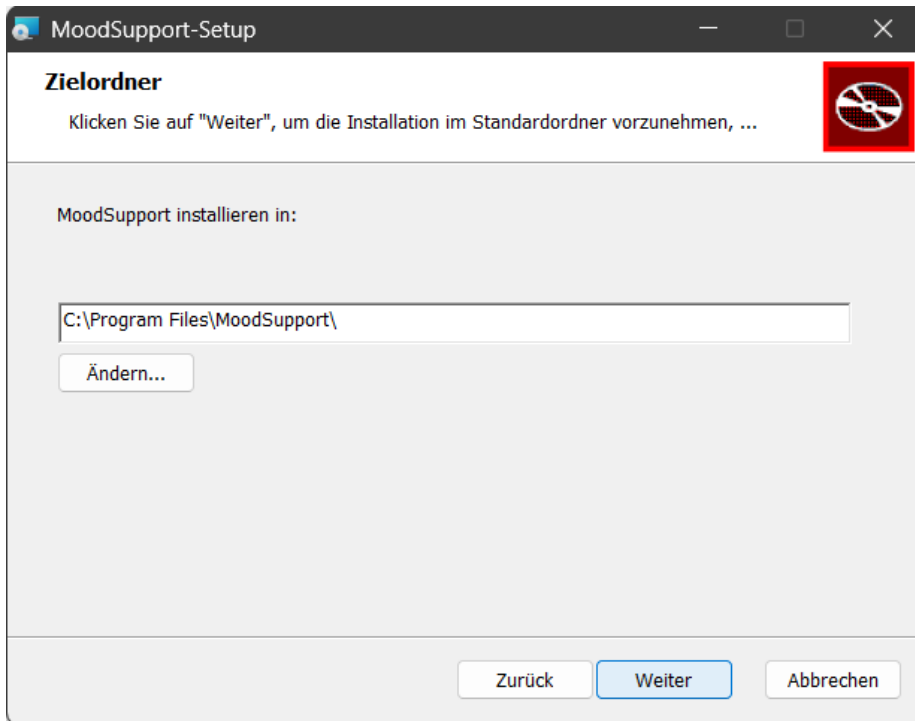

Schritt 3

Auf "Installieren" klicken. Für diesen Schritt sind Administratorrechte erforderlich. Falls die Benutzerkontensteuerung erscheint ("Möchten Sie zulassen ...?"), mit "Ja" bestätigen.

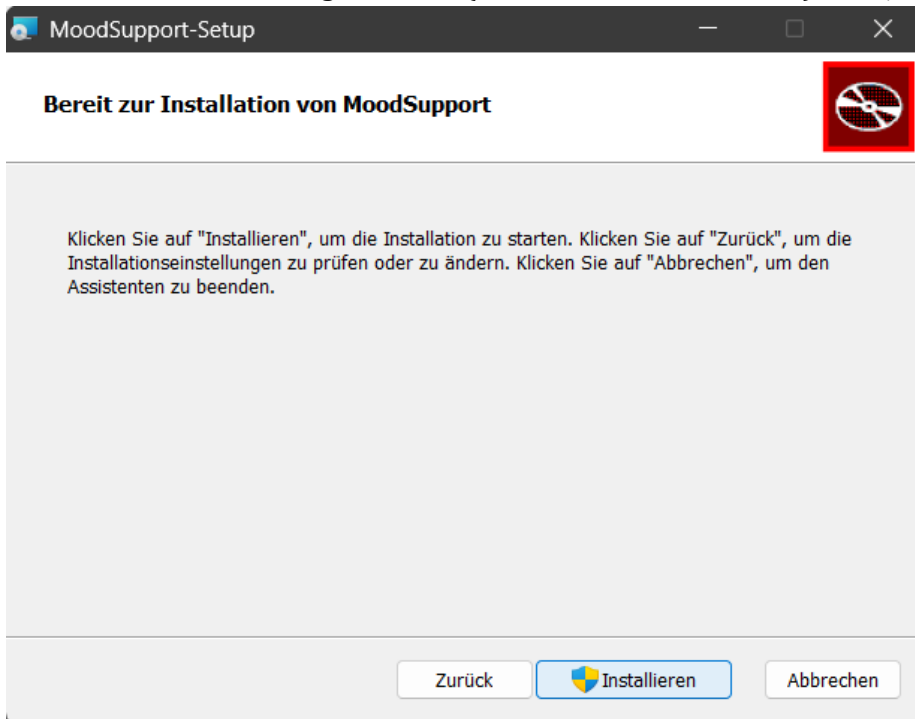

Schritt 4

Nach Abschluss der Installation auf "Fertig stellen" klicken.




Eine Desktop-Verknüpfung wird automatisch erstellt. Die App kann anschließend über die Desktop-Verknüpfung, weitere Verknüpfungen oder das Tray-Symbol gestartet werden.

Option 2: Installation über die ZIP-Version


Schritt 1

Die Datei "MoodSupport.zip" herunterladen und in den Download-Ordner wechseln.

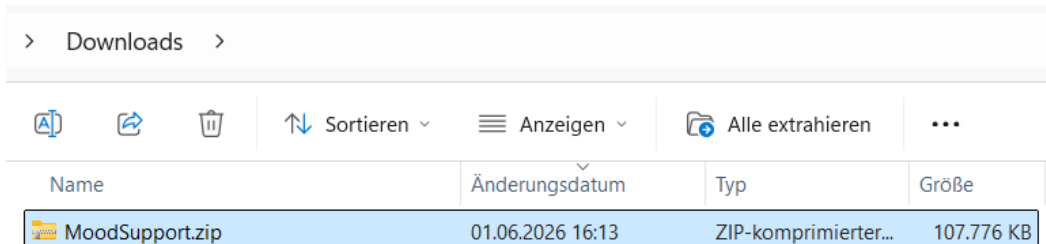


Schritt 2

Auf "Alle extrahieren" klicken, den gewünschten Zielordner auswählen und auf "Extrahieren" klicken.

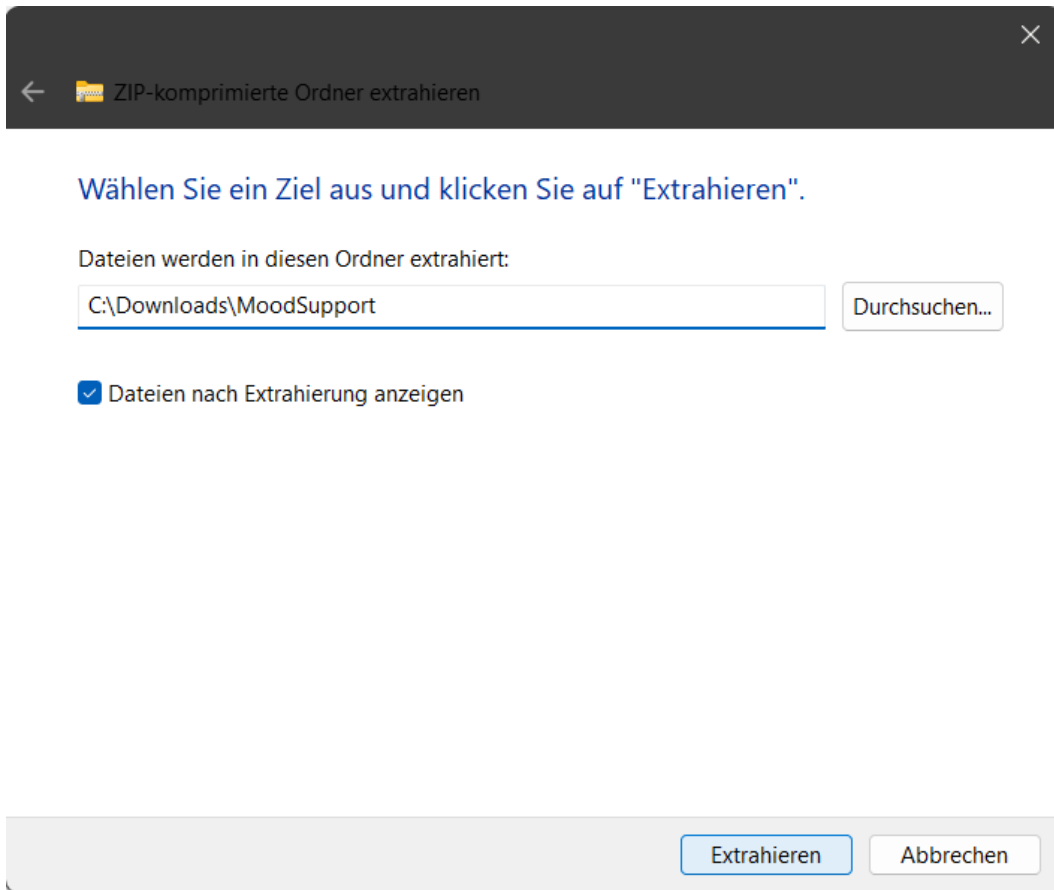

Schritt 3

Im entpackten Ordner die Datei "MoodSupport.exe" per Doppelklick starten.

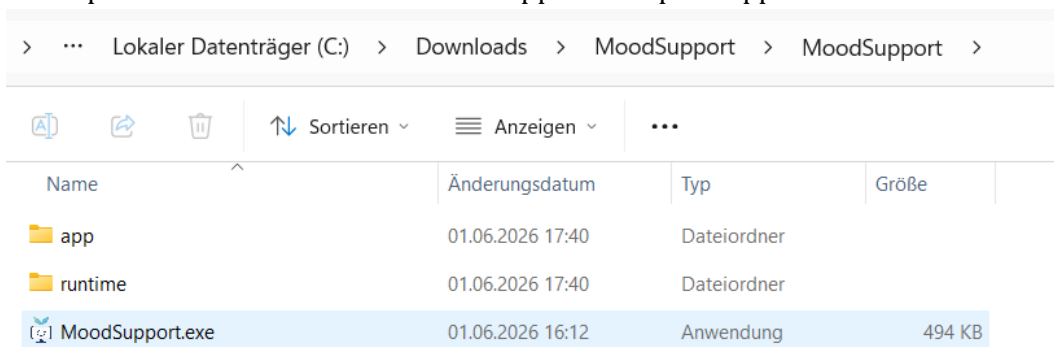


Optional kann die Anwendung an die Startseite oder Taskleiste angeheftet werden oder eine Desktop-Verknüpfung erstellt werden, damit MoodSupport leichter erreichbar bleibt.

Nach dem Start ist MoodSupport jederzeit über die EXE-Datei, evtl. vorhandene Verknüpfungen oder das Tray-Symbol erreichbar.

Hinweis zur weiteren Benutzung

Nach dem Start läuft MoodSupport als Tray-Anwendung im Hintergrund weiter, damit Benachrichtigungen zugestellt werden können.

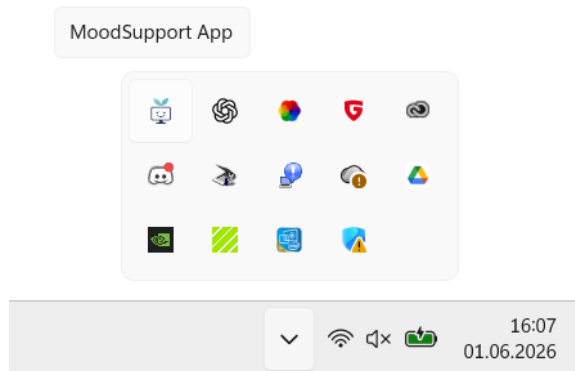

Die App kann jederzeit über einen Doppelklick auf das Tray-Symbol wieder geöffnet werden. Dort kann sie bei Bedarf auch vollständig beendet werden (über Rechtsklick → "Beenden").

Deinstallation von MoodSupport

Vor der Deinstallation bzw. dem Löschen der Anwendung sollte MoodSupport vollständig beendet werden. Dazu im System-Tray per Rechtsklick auf das MoodSupport-Symbol klicken und "Beenden" auswählen.

MSI-Version

Bei Installation über den MSI-Installer kann MoodSupport über die Windows-Einstellungen entfernt werden:

1. Einstellungen → Apps → Installierte Apps öffnen.
2. Nach MoodSupport suchen.
3. Auf "Deinstallieren" klicken und den Vorgang bestätigen.

Falls die Benutzerkontensteuerung erscheint ("Möchten Sie zulassen ...?"), muss der Vorgang mit "Ja" bestätigt werden.

ZIP-Version

Bei Verwendung der ZIP-Version ist keine klassische Deinstallation erforderlich.

Dazu einfach den entpackten MoodSupport-Ordner einschließlich der Datei MoodSupport.exe löschen.

Lokale Daten vollständig entfernen (optional)

Für ein vollständiges Entfernen aller lokalen MoodSupport-Daten können zusätzlich folgende Ordner gelöscht werden:

[Festplatte]:\Benutzer\[Name]\MoodSupport

[Festplatte]:\Benutzer\[Name]\.moodsupport-app

Diese Ordner enthalten lokale Studiendaten, Log-Dateien, sowie exportierte Backups.

Nach dem Löschen dieser Ordner befinden sich keine lokalen MoodSupport-Anwendungsdaten mehr auf dem Gerät.